

EMS-Rail – höchste Stabilität & beste Hygiene
stabil. modern. hygienisch.


mefina medical[®]
Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte


Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare

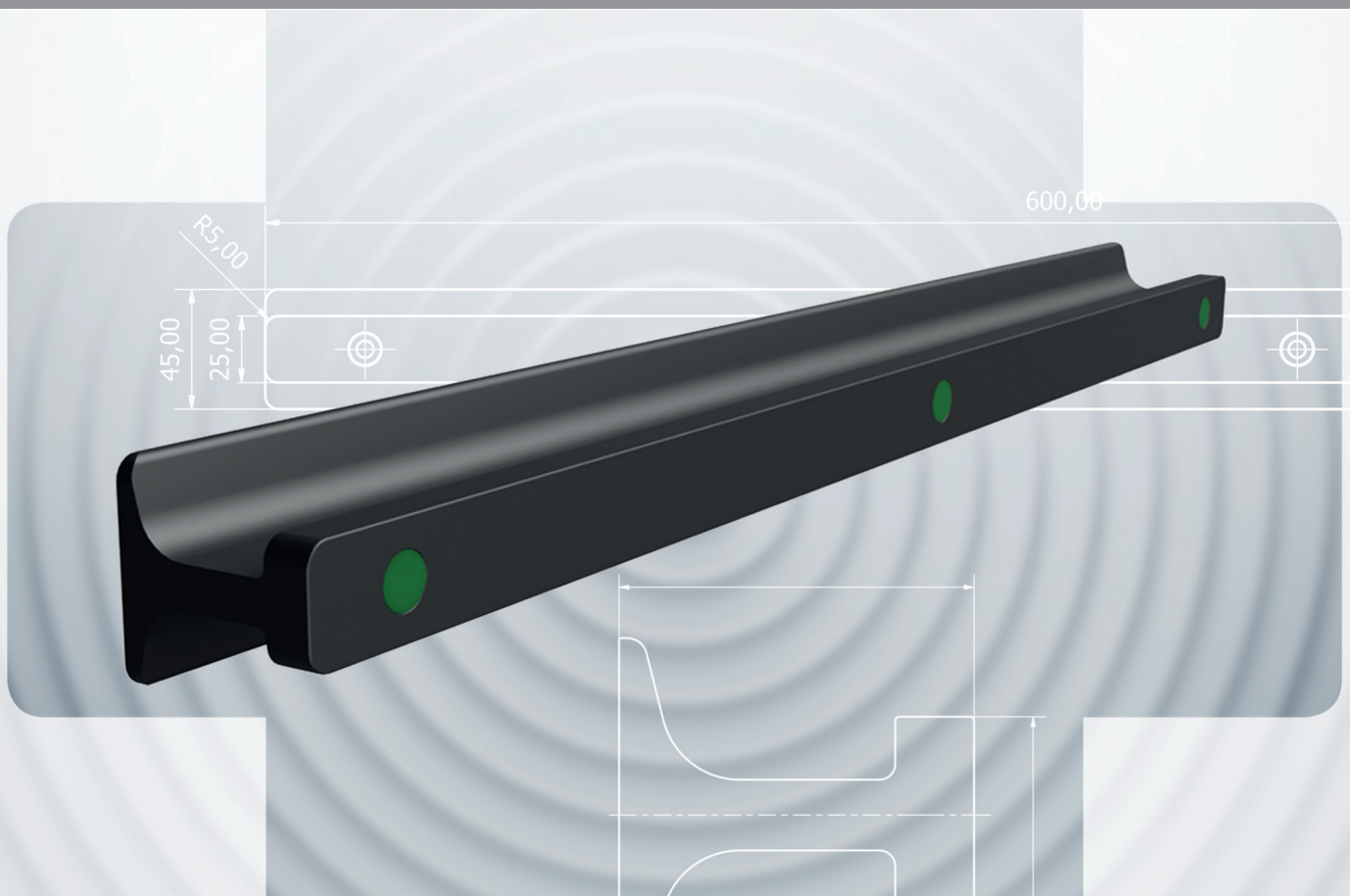

EMS-Rail – höchste Stabilität & beste Hygiene
stabil. modern. hygienisch.

Das Schienensystem der neuen Generation: **EMS-Rail**

Bisher: offene Schraublöcher in den Schienen, auf Dauer öfter wackelig und verkratzt – eingeschränkte Belastbarkeit

Neu: das **Mefina-Geräteschienen-System EMS-Rail** (gemäß DIN 19054:2017-04 und DIN EN 1789:2020-12)



Die **8** Neuheiten

- **100 % hygienisch**
 - keine offenen Schraublöcher
 - eine komplett glatte Oberfläche
 - formschlüssige Montage an der Wand durch die besondere Kontur
- **optimierter Abstand zwischen Schiene und Wand**, um **alle Arten** von Klauen (Hebel-, Spann-, Dreh- oder Knebelklauen) mit der nötigen Freiheit für Finger/Hand anbringen zu können
- **dauerhaft maximale Festigkeit durch die vollflächige Anlage an der Wand** – keine Lockerung
- **sehr hohe Belastbarkeit:** 20 kg je waagerechter Schiene
- **erfüllt die DIN EN 1789:2020-12** und bietet **zusätzlich** die Sicherheit von 15 g
- **integrierter Potentialausgleich** für elektrische Sicherheit (Anwenderschutz)
- **rundum hohe Kratzfestigkeit** durch spezielle Oberflächenveredelung
- **hochwertiges, leichtes Aluminium**

*nachgewiesen anlässlich einer dynamischen Prüfung am 07.04.2021, gemäß DIN EN 1789:2020-12, 4.4.11/5.3.5

EMS-Rail-Variante **einreihig**

Artikel Nr.	Länge	Ausführung	üblicher Verwendungszweck
16075	30 cm	EMS-Rail, einreihig	Kleingeräte und Zubehör
16076	40 cm	EMS-Rail, einreihig	Spritzen- oder Absaugpumpe
16077	50 cm	EMS-Rail, einreihig	Beatmungsgerät
16078	60 cm	EMS-Rail, einreihig	EKG/Defi mit Seitentaschen

EMS-Rail-Variante **Hessen**

Ihre neuen RTW/MZF sind bestens gerüstet durch das bewährte 2-reihige System „Hessen“ in Kombination mit dem System EMS-Rail und dessen acht Vorteilen.

Im Standard liefern wir die Variante Hessen in den Breiten 50 cm oder 60 cm.

Die 2er- und 3er- Doppelschienen (= EMS-Rail-Tower) sind über die senkrechten Schienen komplett verbunden. Diese bieten zusätzlichen Platz, beispielsweise für temporäre Geräte oder Geräte/Zubehör mit senkrechten Stativklauen.




Artikel Nr.	Länge	Ausführung	Gesamthöhe
16079	50 cm	EMS-Rail, Variante Hessen, 1 Schienenpaar	25 cm
16273	50 cm	EMS-Rail, Variante Hessen, 2 Schienenpaare	70 cm
16274	50 cm	EMS-Rail, Variante Hessen, 3 Schienenpaare	125 cm
16080	60 cm	EMS-Rail, Variante Hessen, 1 Schienenpaar	25 cm
16275	60 cm	EMS-Rail, Variante Hessen, 2 Schienenpaare	70 cm
16276	60 cm	EMS-Rail, Variante Hessen, 3 Schienenpaare	125 cm

Sonderausführungen

Sonderausführungen sind lieferbar in jeder Länge zwischen 20 cm und 200 cm, einreihig, doppelreihig (Typ Hessen), als höhenverstellbarer EMS-Rail-Tower und in verschiedenen Farben. Unser Fachberater-Team berät Sie gerne weiterführend.




von
20 cm
bis
200 cm

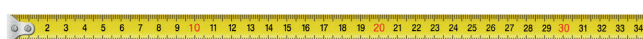

Schutzkappen

Ergänzend liefern wir Sets mit Abdeckkappen für die Schraubenlöcher. Damit sind diese dauerhaft und form-schlüssig abgedeckt = 100 % Hygieneoptimierung.

Artikel Nr.	Stückzahl je VPE
16081	5
16082	20
16083	50

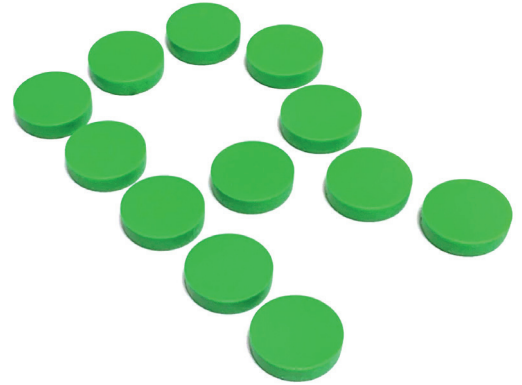

3 - 7 Jahre Garantie*

Sie möchten mehr Planungssicherheit?

Wir bieten bereits kostenfrei 3 Jahre Garantie ab Auslieferung und ergänzende Garantiepakete (Beispiel für 1-reihige Rails):

Garantiepaket I für die Jahre 4 & 5: einmalig 7,- Euro + USt.

Garantiepaket II** für die Jahre 6 & 7: einmalig 11,- Euro + USt.



* Garantiebedingungen: Ausgeschlossen von der Garantie sind unsachgemäße Anwendung, fehlerhafte Aufbereitung oder Beschädigungen.
** Garantiepaket II setzt das Garantiepaket I voraus

Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen. Sortimentsänderungen vorbehalten. Mefina Medical und EMS-Rail sind als Marke geschützt.

Weitere Produktgruppen aus unserem Haus:

- Lagerungshilfen
- (Spezial-) Auflagen
- Trage-/Rettungstücher
- Trainingsprodukte
- Simulationssysteme
- Transportinkubatoren
- Mobile Intensivsysteme
- Klinische Spezialprodukte

Gerne beraten wir Sie weiterführend zu allen Produkten und Lösungen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0)21 04 / 833 80-0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Betriebsstätte Wien
Tuchlauben 7a
A-1010 Wien
Telefon: +43 (0)1 / 3 48 77 44-0
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at

