

Auftragsentwicklung
Gerätehalterungen und mobile Systeme
individuell. effizient. wertig.

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte


Rollboards/Transferhilfen

Simulationsysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare

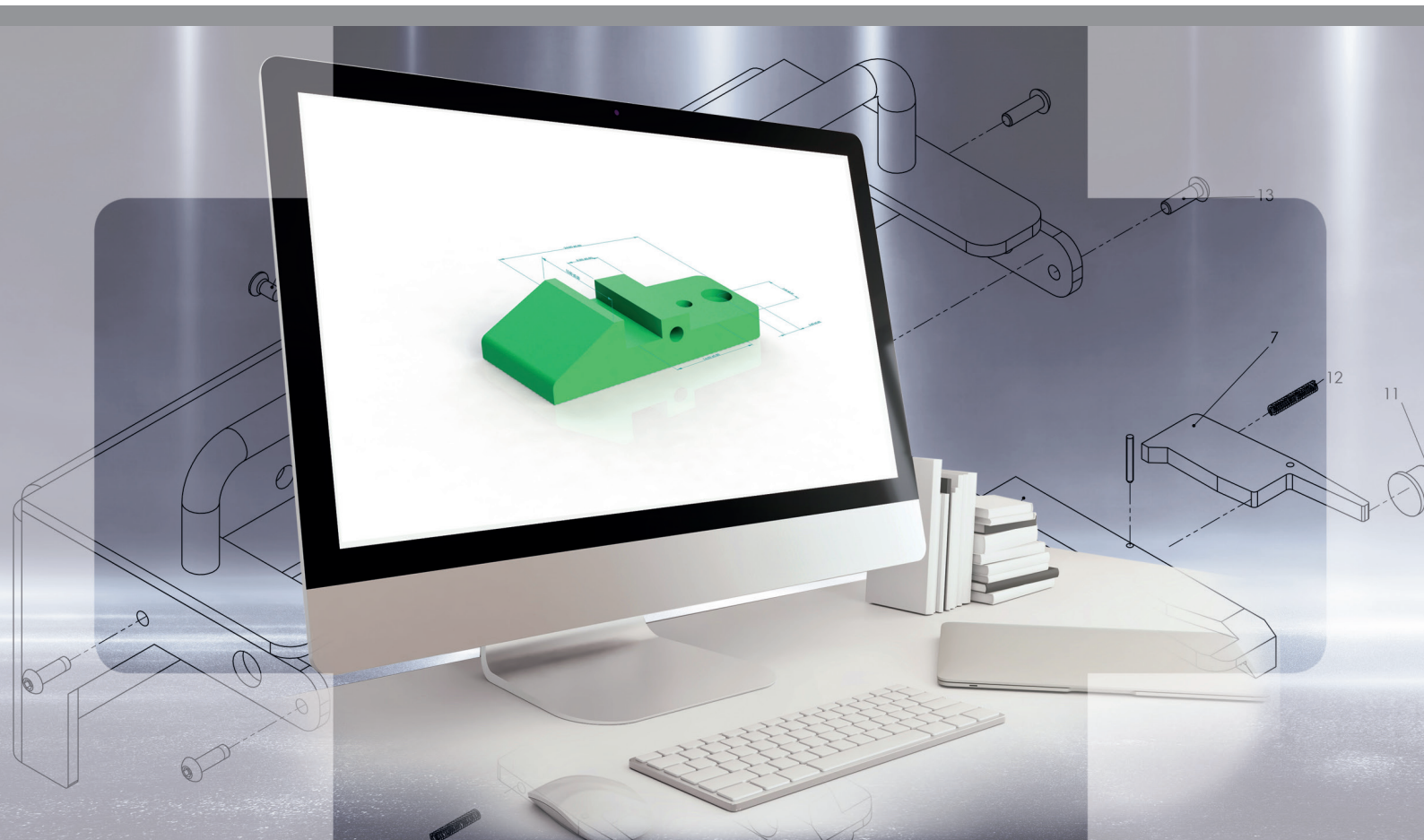

Exakt zugeschnitten auf Ihre Erfordernisse

Die Anforderungen für mobile Lösungen, Transportsysteme und Zubehör wandeln sich ständig und werden immer komplexer.

Daher stellen wir unsere Konstruktion, unser Projektteam und die Fertigung auch Ihnen zur Verfügung, um Sonderlösungen, Zubehör oder Innovationen zu entwickeln.

Nach gemeinsamer Erstellung eines Lasten-/Pflichtenheftes erarbeitet unser Projektteam, bestehend aus medizinischen und technischen Fachkräften, erste Skizzen zur Abstimmung mit Ihnen. Nach Auswahl der besten Lösung und weiteren Optimierungen, wird in der Prototypenphase ein Muster angefertigt zur mechanischen Prüfung mit Originalgeräten.

Im nächsten Schritt erfolgen die dynamischen Prüfungen (z. B. nach DIN EN 1789, DIN EN 60601-1-12) in Zusammenarbeit mit einem akkreditierten Prüflabor.

Die Endbearbeitung der Produktakte erfolgt unter Anwendung des Risikomanagements für Medizinprodukte und der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte sowie unter Berücksichtigung einschlägiger Normen.

Das CE-Konformitätsverfahren und die Erstellung der CE-Konformitätserklärung erfolgen durch uns. Darüber hinaus stellen wir Ihnen internet- und druckoptimierte Dateien, Prüfzertifikate zu den externen Prüfungen und Produktdatenblätter bereit.

Bei Bedarf führen wir auch Unterweisungen Ihres Teams durch.

Gerne entwickeln wir im Kundenauftrag auch komplett neue Produkte. Auf Wunsch übernehmen wir die gesamte Projektsteuerung vom Pflichtenheft bis zur Markteinführung. Dabei bringen wir Ihre Ideen mit unseren Projekt- und Anwendererfahrungen sowie bekannten Kundenwünschen zusammen. Grundlage einer solchen **Auftragsentwicklung** ist eine gegenseitige Vereinbarung.

Ihre Anforderungen und Wünsche gepaart mit unseren Erfahrungen und Ideen – so entstehen funktionelle Lösungen. Fordern Sie uns! Sie haben Ideen oder Lösungswünsche? Wir entwickeln diese mit Ihnen gemeinsam.

Ihre Ansprechpartner: **Stefan Fischer** oder **Jan Lesczensky**



Beispiel-Projekt:
Halterung für Space-Geräte der Firma B. Braun[®]

Beispiel-Projekt:
Adapterplatte für CARDIOHELP[®]-System der Firma Maquet[®]

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0) 21 04 / 833 80-0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Linz
Peter-Behrens-Platz 3
A-4020 Linz
Telefon: +43 (0) 732 / 93 16 40
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at

