

med. Mehrweg-Schutzoverall protect plus


mefina medical[®]
Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare




**Made in
Germany**

Die umweltgerechte Alternative zum Einweg-Overall

Der **med. Mehrweg-Schutzoverall** ist u. a. gemäß der DIN EN 14126 erfolgreich geprüft und besteht aus einer hochwertigen, medizinischen Textilie mit wasserabweisender Oberfläche.

Dieser Schutzoverall ist für den Einsatz am Patienten bestimmt und schützt wechselseitig Personal und Patienten. So wird die Kontamination mit Infektionserregern vermindert und die Verschleppung von Keimen vermieden.

Der Mehrweg-Schutzoverall stellt eine gute Alternative zu Einwegoveralls dar, die in großer Menge bevorratet und letztlich auch entsorgt werden müssen.

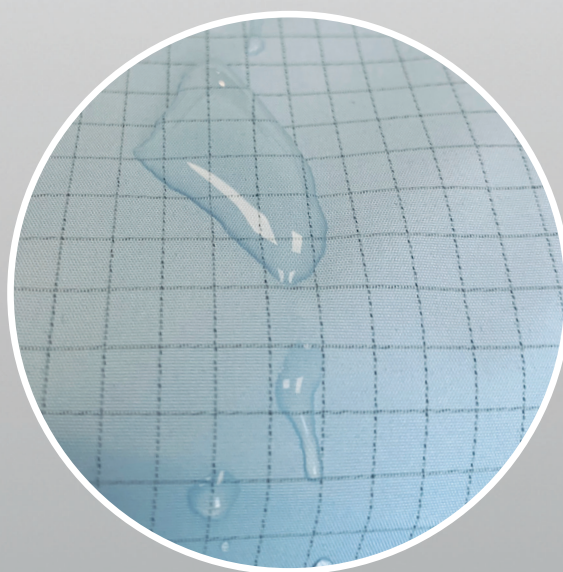

Deutlich sichtbar ist die wasserabweisende Oberfläche des Mehrweg-Overalls. Auch ölige Substanzen können nicht eindringen.

Alle Eigenschaften auf einen Blick

- ✓ CE-gekennzeichnet
- ✓ hochwertige Textilie aus Polyester
- ✓ Oberfläche lässt Flüssigkeiten abperlen
- ✓ sprüh- und wischdesinfizierbar
- ✓ waschbar bis 95° C
- ✓ trocknergeeignet
- ✓ geeignet für industrielle Reinigung (P)*
- ✓ flammhemmend
- ✓ atmungsaktiv
- ✓ hohe Reißfestigkeit
- ✓ erhältlich in den Größen S bis XXL

Das Material entspricht der Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von textilen Flächengebilden – DIN EN ISO 9237:1995-12.

Sonderversionen

Bereits ab 100 Stück erhalten Sie individuelle Zuschnitte und Ausführungen. Sprechen Sie uns gerne an.

Wiederaufbereitung

Gemäß der Norm DIN EN 20811 hält der Stoff beispielsweise nach 50 Wäschen noch immer dem Wasserdruck entsprechend einer Wassersäule von mehr als 2 (m) stand.

Das Produkt wurde auch für eine Aufbereitung mittels Sterilisation getestet (ein entsprechendes Musterverfahren stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung).

Erfüllte Normen u. a.

- **DIN EN 14126:2004**; Berichtigung 1:2005 Schutzkleidung gegen Infektionserreger, Leistungsanforderungen und Prüfverfahren
- Normenreihe **DIN EN 10993**, biologische Beurteilung von Medizinprodukten
- Dabei entspricht die Luftdurchlässigkeit des verwendeten Materials der **DIN EN 9237:1995-12**.
- Das sehr strapazierfähige Material besitzt nach **DIN EN 13934-1:2013-08** eine hohe Reißfestigkeit.

Die Textilie ist nach DIN EN ISO 4920:2012-12 (Sprühverfahren) wasserabweisend.

Das robuste Material weist eine hohe Reißfestigkeit auf.

Der Overall ist bis 95° C waschbar.



Spezialprodukte für hohes Patientenaufkommen

Neben den hier dargestellten Artikeln bieten wir eine Vielzahl von Produkten und Lösungen an, um höheres Patientenaufkommen und den Massenanfall Verletzter/Erkrankter bewältigen zu können.

Beispielsweise:

- ✓ Temporäre Personenschleuse für Behandlungsräume
- ✓ Mefina Notfall-Patientenbett
- ✓ Mehrweg-Schutzkittel
- ✓ Sauerstoffverteiler-Boxen
- ✓ Stromverteiler-Boxen für den medizinischen Bereich
- ✓ Notversorgungsboxen mit unterschiedlicher Ausstattung
- ✓ Temporäre Isolierräume
- ✓ Temporäre Intensivbehandlungsplätze

und **Medizingeräte zur Miete.**

In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen.

Weitere Produktgruppen aus unserem Haus:

- Lagerungshilfen
- (Spezial-) Auflagen
- Trage-/Rettungstücher
- Trainingsprodukte
- Simulationssysteme
- Transportinkubatoren
- Mobile Intensivsysteme
- Klinische Spezialprodukte

Gerne beraten wir Sie weiterführend zu allen Produkten und Lösungen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0)21 04 / 833 80-0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Linz
Industriezeile 47a
A-4020 Linz
Telefon: +43 (0)7 32 / 93 16 40
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at

