

B.Braun® Space®

variabel. sicher. kompatibel.


mefina medical®
Medizinische Produkte & Dienstleistungen

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Notfallmedizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



B.Braun® Space®
variabel. sicher. kompatibel.

Der Perfusor® Space

Der **Perfusor® Space** ist eine leichte, mobile Spritzenpumpe zur Verabreichung von Flüssigkeiten in der Infusions- und Ernährungstherapie.

Das breite Anwendungsspektrum reicht von der medizinischen Versorgung in der Neonatologie über die Pädiatrie bis hin zum Erwachsenen.

Die lange Akkulaufzeit von bis zu 8 h (bei einer Förderrate von 25 ml/h) macht den mobilen Einsatz neben einem stationären Betrieb möglich. So ist der Perfusor® Space ideal für den Rettungsdienst z. B. in RTWs, NEFs oder ITWs geeignet. Das integrierte Ladesystem lädt Akkus auch während die Spritzenpumpe an ein Stromversorgungsnetz mit Niederspannung angeschlossen ist. Netzspannungen von 12 V wie auch 230 V können direkt verwendet werden.

Für den stationären oder mobilen Einsatz in Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen oder auch im Homecare-Bereich empfehlen wir den Perfusor® Space ebenfalls.

Einen großen Vorteil gegenüber anderen Systemen bietet die Unabhängigkeit von

Spritzenherstellern und -größen, da alle gängigen Spritzen mit dem Perfusor® Space verwendet werden können. Dabei sind Zielvolumina von 0,1 bis 9999,9 ml oder kontinuierliche Förderraten bis 200 ml/h¹ wählbar. Zusätzliche Bolusgaben können mit bis zu 1800 ml/h verabreicht werden.

Die Hintergrundbeleuchtung des Grafikdisplays erlaubt im Falle von schwierigen Lichtverhältnissen ein leichtes Ablesen. Während des Betriebes tragen verschiedene optische und akustische Warnsignale zur zusätzlichen Sicherheit bei.

Seine schnelle und intuitive Bedienung macht den Perfusor® Space besonders anwenderfreundlich.

Die Inbetriebnahme erfolgt durch einen unserer – und von der Firma B.Braun autorisierten – Fachberater.



Die individuelle Medikamenten-Bibliothek

Der **Perfusor® Space** bietet die Möglichkeit, eine individuelle Medikamentendatenbank für das vom Anwender gewünschte Einsatzgebiet anzulegen. Die Techniker von Mefina Medical programmieren in Abstimmung mit dem Kunden die gewünschten Medikamente und Dosierungen am Gerät. Dabei kann die Datenbank des Systems bis zu 1200 Medikamente umfassen. Im Menü sind bis zu 30 durch den Anwender definierte Medikamentenkategorien möglich. Durch ein festgelegtes Dosislimit kann im späteren Einsatz eine Fehldosierungen vermieden werden.

Via QR-Code zur Kurz-Anleitung

Die **Geräte** sind mit einem QR-Code ausgestattet, über den man leicht mit einem Smartphone oder Tablet direkt auf die Kurz-Anleitung im Internet* zugreifen kann.

So ist ein schneller und hygienischer Zugriff auf wichtige Informationen zum Gerät jeder Zeit möglich.



* Voraussetzung ist eine W-Lan- oder Telefonnetz-Anbindung sowie eine App zur QR-Erkennung

Stabile Gerätehalterungen

Die **Metallhalterungen** von Mefina Medical sind äußerst robust und bieten optimalen Schutz für die Space-Perfusoren. Dabei lässt sich die Oberfläche der pulverbeschichteten Halterung leicht reinigen.


Unser Konzept lässt eine Wand- und Standmontage, die Befestigung an einem Stativ oder an einer Normschiene zu.

Darüber hinaus verfügt jede der Halterungen* über einen stabilen Edelstahlhandgriff an der Oberseite.

Optional können die Gerätehalterungen mit einem Anprallschutz für den Spritzenantrieb ausgestattet werden, der für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Die Serie wurde gemäß DIN EN 1789 dynamisch geprüft. Mefina-Halterungen gibt es in den Größen für eine, zwei oder drei Pumpen. Alle Mefina-Space-Halterungen werden auch wahlweise als Ladehalterung mit einer direkten

Anschlussmöglichkeit für 12 Volt oder 230 Volt angeboten. Zudem benötigen Mehrfachladehalterungen nur ein Ladekabel.

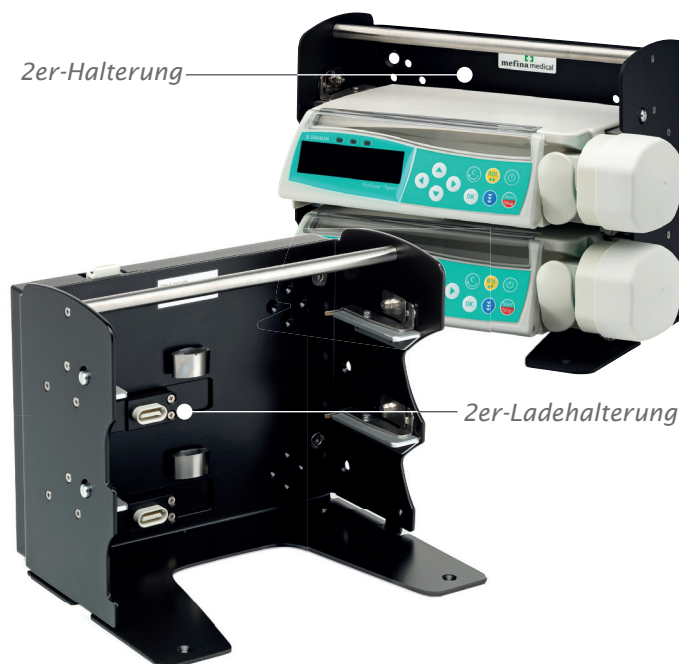

*mit Ausnahme der Space- Halterung Light

Ausführung	Wand- oder Standmontage	mit Klaue(n) für Stativmontage	mit Klaue(n) für Normschiene-montage	zusätzlicher Schutzbügel
1er-Halterung	11971	11980	11979	11285
1er-Ladehalterung	13384	13958	13642	11285
2er-Halterung	11089	11091	11090	2 x 11285
2er-Ladehalterung	13453	13660	14615	2 x 11285
3er-Halterung	11092	11094	11093	3 x 11285
3er-Ladehalterung	14861	14863	14864	3 x 11285
1er-Halterung Light	14589	14624	14492	11285

Anwendungsschulungen

Unsere **qualifizierten Fachberater** sind durch den Hersteller in der Bedienung und Einrichtung des Perfusor® Space® besonders geschult. Daher bieten wir individuelle und auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte Anwen-

dungsschulungen für das System an. Bitte sprechen Sie mit dem für Ihren Bereich zuständigen Außendienstmitarbeiter und lassen sich hierzu detaillierte Informationen geben.

Kaufen oder mieten?

Das **Mieten** bietet eine gute Alternative zum Anlagegut und vermeidet damit die Bindung von Kapital.

Unser Mietangebot umfasst die Bereitstellung einschließlich der Erstinbetriebnahme vor Ort und die Einweisung gem. MPBetreibV für einmalig 65,- € sowie den Tagessatz von 1,79 € je Gerät zzgl. USt. Die Mindestmietzeit beträgt dabei 12 Monate. Die maximal mögliche Laufzeit beträgt 60 Monate. Bei Abschluss eines Folgevertrages nach 60 Monaten erhalten Sie einen fabrikneuen Perfusor® Space.

Bei Rückgabe berechnen wir Ihnen eine Pauschale von 129,- € + USt. für die Prüfung und Aufbereitung des Gerätes. Diese Gebühr entfällt bei einer Mietzeit ab dem 36. Monat. Unsere Angebote sind freibleibend und nur für Endabnehmer.

Rechtliche Hinweise

Die Produkte dieses Flyers tragen die CE-Kennzeichnung, gemäß der Verordnung (EU) 2017/745. Alle Information richtet sich nur an Fachkreise, gemäß Heilmittelwerbegesetz (HWG). Unser Angebot und alle Informationen richten sich ausdrücklich nicht an Laien/Patienten. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen. Sortimentsänderungen vorbehalten. In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt.

Service- und Wartung

Mit der **zunehmenden Komplexität** von medizintechnischen Geräten sind neben den Anschaffungsaufwendungen auch die laufenden Kosten für eine Wartung, die Schulung des Personals, die Beschaffung von Ersatzgeräten oder Reparaturen ein wirtschaftlicher Faktor.

Eine Kostentransparenz, die von vornherein potenzielle Ausgaben ausweist, garantiert hierbei ein budgetgerechtes Planen.

Verschiedene Servicepakete des Mefina medTec-Systemservices helfen Ihnen dabei, nicht nur laufende Kosten transparent zu gestalten, sondern erlauben Ihnen auch, weniger Zeit mit organisatorischen Aufgaben zu verbringen. Zeit, die Sie letztlich besser für Ihre Kernaufgaben verwenden können.

Weitere Produktgruppen aus unserem Haus:

- Lagerungshilfen
- (Spezial-) Auflagen
- Trage-/Rettungstücher
- Trainingsprodukte
- Simulationssysteme
- Transportinkubatoren
- Mobile Intensivsysteme
- Klinische Spezialprodukte

Gerne beraten wir Sie weiterführend zu allen Produkten und Lösungen.

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG

Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0) 21 04 / 8 33 80-0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

Österreich

Mefina Medical GmbH & Co. KG

Betriebsstätte Wien
Tuchlauben 7a
A-1010 Wien
Telefon: +43 (0) 1 / 3 48 77 44-0
E-Mail: info@mefina-medical.at
Internet: mefina-medical.at

